



SX-118

Multifunkční ultrajemné bublinkové kosmetické zařízení

Uživatelská příručka

Parametry produktu

Jméno	Multifunkční ultrajemná bublina kosmetický přístroj
vstupní napětí	5V ===
Napětí baterie	3.7V
Vstupní výkon	2.8 W
Použitelný typ pleti	Přístroj je vhodný pro jakýkoli typ pleti (při použití s roztoky pro péči o pleť nejprve zjistěte, pro jaký typ pleti je roztok vhodný)

Kosmetický přístroj se skládá z následujících základních komponent



Tělo nástroje * 1



Sonda *6 (měkká sonda *3, tvrdá sonda *3)

Opatření pro změnu
Zarovnejte trubku s prostředním otvorem sondy s otvorem v zařízení.
Pokud není pozice zarovnaná, nezobrazí se žádné bubliny.




USB nabíjecí kabel*1

připomínka

1. Tento produkt obsahuje celkem 6 sacích hlavice, skládajících se ze 3 měkkých sacích hlavice a 3 tvrdých sacích hlavice. Malé sací hlavice jsou vhodné pro osvětlení menších oblastí (jako jsou nosní křídla atd.), zatímco velké sací hlavice jsou ideální pro větší oblasti (jako jsou tvář, čelo atd.). Měkké sací hlavice se doporučují pro osoby s jemnou pleť. Vyberte si prosím vhodnou sací hlavici na základě praktických zkušeností, typu pleti a osvětřované oblasti.
2. Před přidáním nového roztoku vycištěte láhev s roztokem. Množství roztoku nemělo být ani příliš mnoho, ani příliš málo – doporučuje se naplnit láhev asi do poloviny. Před změnou řešení se ujistěte, že rozumíte typům pleti, pro které je řešení vhodné, a veškerým souvisejícím opatřením. Láhev s roztokem může být naplněna čistou vodou energizující vodou čistící roztok, roztok na odstranění černých teček, odličovací make-upu, tonikum, esence pletěvé mlha atd. Tyto roztoky je třeba zakoupit samostatně.

Grafický popis

Čistá voda
nebo
perlivá voda

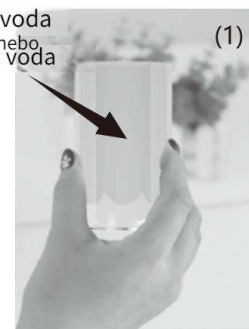

(1)



(2)

Kombinace



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

Horký obklad

Angličtina

Vážení uživateli

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Děkujeme!

1. Tento produkt není vhodný pro děti, starší osoby nebo uživatele s mentálním postižením. V případě neschopnosti obsluhy zajistěte dohled a vedení. (Uchovávejte mimo dosah dětí.)
2. Pokud během používání pocítíte kožní nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat
3. Nepřikládejte na jedno místo na kůži déle než 2 sekundy, abyste zabránili vzniku modřin nebo otoků.
4. Pro odstranění odolných černých teček použijte funkci ohřevu v kombinaci s přípravkem na černé tečky (černé tečky nebo jiná řešení je třeba zakoupit samostatně) a doporučuje se používat jednou týdně
5. Během spouštění a používání tohoto produktu s ním energicky netřeste a nepoužívejte jej dnem vzhůru.
6. Sací síla má 3 režimy rychlosti (přepínání krátkým stisknutím tlačítka napájení). Funkce vyhrávání (dlouhým stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete).
7. Během používání zvolte vhodnou sondu a polohu, abyste zabránili nasátí kůže
8. Nadměrné používání může způsobit kožní problémy. Pokud pocítíte kožní nepohodlí, přestaňte jej používat.
9. Při provádění čištění nebo péče o obličej v kombinaci s produkty péče o pleť se prosím nejprve seznámte s vhodnými typy pleti a bezpečnostními opatřeními produktů péče o pleť
10. Nepoužívejte ani neskladujte tento produkt na místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nadměrným prachem nebo korozivními plyny, protože to může způsobit poruchu zařízení a zkrátit jeho životnost
11. Neponorujte tento produkt zcela do vody kvůli čištění. (Čištění je třeba pouze sací hlavu a nádržku na vodu.)
12. Neotírejte tento produkt chemickými léky.
13. Zabraňte pádu produktu a vyhněte se nárazům.
14. Neprofesionálům je zakázáno rozebírat nebo opravovat tento produkt sami.
- Pro nabíjení tohoto produktu se doporučuje používat nabíječku Dc 5V. Produkt nelze používat během nabíjení.
16. Vestavěná lithium-iontová baterie tohoto produktu má 300 mAh a odhaduje se, že plné nabití trvá 3 hodiny.
17. Nízká úroveň nabití baterie může ovlivnit uživatelský zážitek. Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
18. Pokud potřebujete být mimo domov nebo cestovat během nabíjení, nejprve odpojte napájení.
19. Před a po použití dezinfikujte sací hlavu. Sací hlavu a nádržku na vodu můžete opláchnout horkou vodou.
20. Roztoky, které lze přidat do nádrže na vodu, zahrnují čistou vodu, energetickou vodu, esenciální olej, kávu, med, bylinné vodu, zinek, čaj, vodu, esenciální kapalinu a toner
21. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší osoby s sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
22. Spotřebičem být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím označení na něm.